



CARATTERISTICHE E OPZIONI PER TAPPETI MEDICALI SERIE *EP-RR*

- DESCRIZIONI
- APPLICABILITA'



FEATURES & OPTIONS FOR *EP-RR* SERIES MEDICAL TREADMILLS

- DESCRIPTIONS
- COMPATIBILITY



CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES PARA CINTAS DE CORRER MEDICALES SERIE *EP-RR*

- DESCRIPCIONES
- APLICABILIDAD



CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS POUR TAPIS ROULANTS MÉDICAUX SÉRIE *EP-RR*

- DESCRIPTIONS
- COMPATIBILITÉ

EP-RR2011T



EP-RR2011TRPC



EP-RR2011TJPC



EP-RR7410TPC



EP-RR7410TJPC



EP-RR7411TPC



Ulteriori modelli sono disponibili a richiesta.


Further models are available on request.

Hay otros modelos disponibles bajo pedido.

D'autres modèles sont disponibles sur demande

		EP-RR2011T	EP-RR2011TRPC	EP-RR2011TJPC	EP-RR7410TPC	EP-RR7410TJPC	EP-RR7411TPC
PESO PAZIENTE PATIENT WEIGHT PESO DEL PACIENTE POIDS DE PATIENT	MASSIMO MAX MAXIMO MÁXIMUM	150 kg	150 kg	150 kg	220 kg	220 kg	220 kg
DIMENSIONI SIZE DIMENSIONES TAILLE	LUNGHEZZA LENGTH LONGITUD LONGUEUR	188 cm	188 cm	188 cm	210 cm	210 cm	260 cm
	LARGHEZZA WIDTH ANCHURA LARGEUR	70 cm	70 cm	70 cm	80 cm	80 cm	80 cm
	ALTEZZA HEIGHT ALTURA HAUTEUR	142 cm	142 cm	142 cm	150 cm	150 cm	150 cm
PESO APPARECCHIO WEIGHT OF DEVICE PESO DE LA CINTA POIDS DE L'APPAREIL		145 kg	145 kg	145 kg	180 kg	180 kg	180 kg
VELOCITA' SPEED VELOCIDAD VITESSE	MINIMA – MASSIMA MIN - MAX MÍNIMO – MÁXIMO MINIMUM – MAXIMUM	0,1 – 20 km/h	0,1 - 20 km/h	0,1 - 20 km/h	0,1 - 25 km/h	0,1 - 25 km/h	0,1 - 25 km/h
	SENSIBILITA SENSIBILITY SENSIBILIDAD SENSIBILITÉ	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %

		EP-RR2011T	EP-RR2011TRPC	EP-RR2011TJPC	EP-RR7410TPC	EP-RR7410TJPC	EP-RR7411TPC
PENDENZA SLOPE INCLINACIÓN PENTE	INTERVALLO INTERVAL INTERVALO INTERVALLE	0 - 22 %	0 - 22 %	0 - 22 %	0 - 30 %	0 - 30 %	0 - 20 %
	INCREMENTO INCREMENT STEP INCREMENTO ÉTAPE D'INCRÉMENTATION	0,5 / 1 %	0,5 / 1 %	0,5 / 1 %	0,5 / 1 %	0,5 / 1 %	0,5 / 1 %
PEDANA RUNNING BELT ZONA DE CARRERA	LUNGHEZZA x LARGHEZZA LENGTH x WIDTH LONGITUD x ANCHURA LONGUEUR x LARGEUR	140 X 48 cm	140 x 48 cm	140 x 48 cm	154,5 x 54 cm	154,5 x 54 cm	204,5 x 54 cm
	AUTOCENTRANTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	SELF-CENTERING	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	AUTOCONCENTRADOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	AUTOCENTRAGE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
CORRIMANI HANDRAILS PASAMANOS MAINS COURANTES		LUNGHI LONG LARGOS LONGUES	CORTI SHORT CORTAS COURTES	CORTI SHORT SHORT CORTAS COURTES	CORTI SHORT SHORT CORTAS COURTES	CORTI SHORT SHORT CORTAS COURTES	CORTI SHORT SHORT CORTAS COURTES
CONSOLLE HEAD CONSOLLE CONSOLLE			MANUALE MANUAL MANUAL MANUEL	MANUALE E AUTOMATICA MANUAL & AUTO MANUAL Y AUTOMATICA MANUEL ET AUTOMATIQUE	PASSIVA PASSIVE PASIVA PASSIVE	MANUALE E AUTOMATICA MANUAL & AUTO MANUAL Y AUTOMATICA MANUEL ET AUTOMATIQUE	PASSIVA PASSIVE PASIVA PASSIVE
DISPLAY SCHERMO PANTALLA ECRAN			10 "	10 "	10 "	10 "	10 "

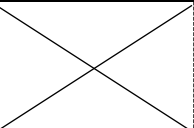		EP-RR2011T	EP-RR2011TRPC	EP-RR2011TJPC	EP-RR7410TPC	EP-RR7410TJPC	EP-RR7411TPC
PILOTAGGIO DA PC REMOTE USE PILOTAJE DESDE PC RACCORD ECG		SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI
INTERFACCIA INTERFACE INTERFAZ INTERFACES	TIPO TYPE TIPO TYPE	RS232 e USB OPTOISOLATA OPTO-ISOLATED RS232 and USB RS232 y USB PROTECCION GALVANICA RS232 et USB OPTO-ISOLÉS					
	PROTOCOLLO PROTOCOL PROTOCOLO PROTOCOLE	TRACKMASTER					
FREQUENZA CARDIACA HEART RATE FRECUENCIA CARDIACA FRÉQUENCE CARDIAQUE				FASCIA TORACICA, IN DOTAZIONE CHEST BELT, INCLUDED CORREA PECTORAL, SUMINISTRADA CEINTURE DE POITRINE, INCLUDE			
STOP DI EMERGENZA EMERGENCY STOP PARADA DE EMERGENCIA ARRÊT D'URGENCE	TASTO ROSSO «A FUNGO» RED BUTTON BOTÓN "CHAMPIÑÓN" ROJO BOUTON ROUGE	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI
	CORDINO A STRAPPO LANYARD CORDÓN DE SEGURIDAD CORDON DE SÉCURITÉ	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI

OPZIONI OPTIONS	OPCIONES OPTIONS	EP-RR2011T	EP-RR2011TRPC	EP-RR2011TJPC	EP-RR7410TPC	EP-RR7410TJPC	EP-RR7411TPC
CORRIMANI LUNGHI LONG HANDRAILS PASAMANOS LARGOS MAINS COURANTES LONGUES	forniti di serie standard accessory acesorio estandard accessoire standard	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI
SOSTEGNO ASCELLARE ARMPIT SUPPORT SOPORTE AXILAR SUPPORT AXILLAIRE		SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI
CONFIGURAZIONE PEDIATRICA PEDIATRIC CONFIGURATION CONFIGURACIÓN PEDIÁTRICA CONFIGURATION PÉDIATRIQUE		SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI
ARCO DI SUPPORTO ANTICADUTA SAFETY ARCH ARCO DE SEGURIDAD ÉTRIER DE SÉCURITÉ		SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI
CORPETTO PER SUPPORTO ANTICADUTA HARNESS FOR SAFETY ARCH ARNÉS POR ARCO DE SEGURIDAD HARNAIS POUR ÉTRIER DE SÉCURITÉ		SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI
RAMPA DI ACCESSO ACCESS RAMP RAMPA DE ACCESO RAMPE D'ACCES		SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI	SI YES SI OUI


EP-RREE0639

**Corrimani lunghi
per serie 2011
(non per EP-RR2011T)**

**Long handrails
for series 2011
(not for EP-RR2011T)**

**Pasamanos largos
por serie 2011
(no para EP-RR2011T)**

**Mains courant longues
pour serie 2011
(pas pour EP-RR2011T)**

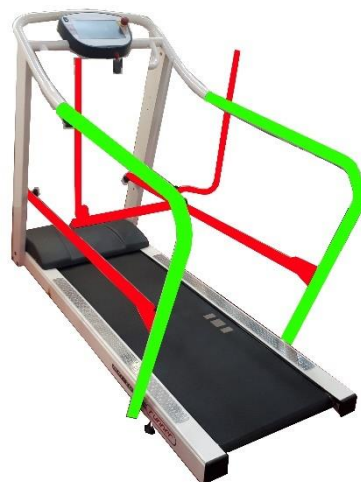

Barre fisse per pazienti adulti. Si fissano alle barre standard e ai longheroni della base. Da ordinarsi insieme al tappeto.

Evidenziate in verde nell'immagine.

Fixed bars for adult patients. They are attached to the standard bars and base rails. To be ordered together with the Treadmill.

Highlighted in Green.

Barras fijas para pacientes adultos. Se fijan a las barras estándar y a los raíles de la base. Deben pedirse junto con la cinta de correr.

Resaltadas en verde.

Barres fixes pour patients adultes. Ils sont fixés aux barres standards et aux rails de base. A commander avec le tapis de course.

Surligné en vert.


EP-RREE0706+0639

**Kit pediatrico
per serie 2011
(non per EP-RR2011T)**

**Paediatric handrails
for series 2011
(not for EP-RR2011T)**

**Pasamanos pediátricos
por serie 2011
(no para EP-RR2011T)**

**Mains courant pediatriques
pour serie 2011
(pas pour EP-RR2011T)**

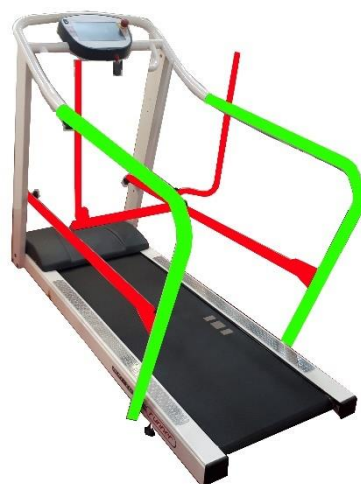

- Barre fisse aggiuntive per pazienti pediatrici
- Barra trasversale, regolabile in altezza

Vengono fornite già montate sulle normali barre per pazienti adulti. EP-RREE0706+0639 è da ordinarsi insieme al tappeto.

Evidenziate in Rosso.

- Fixed additional bars for paediatric patients
- Crossbar, height adjustable

Supplied already mounted on the normal side bars for adult patients. EP-RREE0706+0639 is to be ordered with the Treadmill.

Highlighted in Red.

- Barras fijas adicionales para pacientes pediátricos
- Barra transversal altura regulable

Se suministran ya montadas en las barras normales para pacientes adultos. EP-RREE0706+0639 debe pedirse junto con la cinta de correr.

Resaltadas en rojo.

- Barres supplémentaires pour les patients pédiatriques
- Barre transversale hauteur réglable

Livré déjà monté sur les barres latérales normales pour patients adultes. EP-RREE0706+0639 doit être commandé avec le tapis.


EP-RREE0634

**Corrimani lunghi
per serie 7410**

**Long handrails
for series 7410**

**Pasamanos largos
por serie 7410**

**Mains courant longues
pour serie 7410**

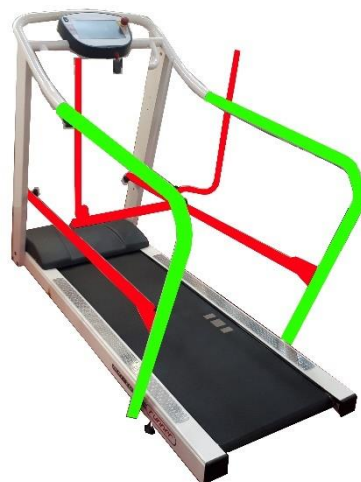

Barre fisse per pazienti adulti. Si fissano alle barre standard e ai longheroni della base. Da ordinarsi insieme al tappeto.

Evidenziate in verde nell'immagine.

Fixed bars for adult patients. They are attached to the standard bars and base rails. To be ordered together with the Treadmill.

Highlighted in Green.

Barras fijas para pacientes adultos. Se fijan a las barras estándar y a los raíles de la base. Deben pedirse junto con la cinta de correr.

Resaltadas en verde.

Barres fixes pour patients adultes. Ils sont fixés aux barres standards et aux rails de base. A commander avec le tapis de course.

Surligné en vert.


EP-RREE0643

**Corrimani lunghi
per serie 7411**

**Long handrails
for series 7411**

**Pasamanos largos
por serie 7411**

**Mains courant longues
pour serie 7411**

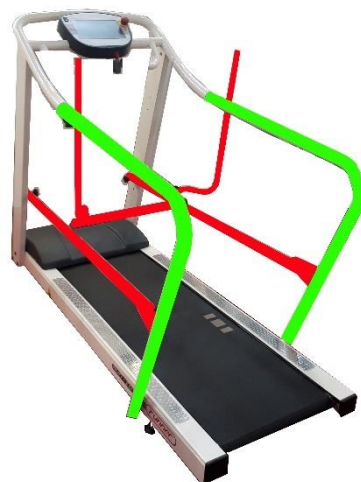

Barre fisse per pazienti adulti. Si fissano alle barre standard e ai longheroni della base. Da ordinarsi insieme al tappeto.

Evidenziate in verde nell'immagine.

Fixed bars for adult patients. They are attached to the standard bars and base rails. To be ordered together with the Treadmill.

Highlighted in Green.

Barras fijas para pacientes adultos. Se fijan a las barras estándar y a los raíles de la base. Deben pedirse junto con la cinta de correr.

Resaltadas en verde.

Barres fixes pour patients adultes. Ils sont fixés aux barres standards et aux rails de base. A commander avec le tapis de course.

Surligné en vert.

EP-RREE0692

Rampa di accesso per 2011

Ramp for 2011

Rampa di acceso por 2011

Rampe pour 2011



Rampa di accesso per paziente critici o con sedia a rotelle.

Access ramp for critical patients or wheelchair users.

Rampa de acceso para usuarios críticos o en silla de ruedas.

Rampe d'accès pour patients critiques ou utilisateurs de fauteuil roulant.

Evidenziata dalla freccia verde.

Highlighted by the Green arrow.

Resaltada por la flecha verde.

Mis en évidence par la flèche verte.

EP-RREE0691

Rampa di accesso per 7410 e 7411

Ramp for 7410 and 7411

Rampa di acceso por 7410 y 7411

Rampe pour 7410 et 7411



Rampa di accesso per paziente critici o con sedia a rotelle.

Access ramp for critical patients or wheelchair users.

Rampa de acceso para usuarios críticos o en silla de ruedas.

Rampe d'accès pour patients critiques ou utilisateurs de fauteuil roulant.

Evidenziata dalla freccia verde.

Highlighted by the Green arrow.

Resaltada por la flecha verde.

Mis en évidence par la flèche verte.

EP-RREE0640

**Supporto anticaduta per 2011,
7410 e 7411**

**Suspension bracket for 2011,
7410 and 7411**

**Soporte de suspensión para
2011, 7410 y 7411**

**Support de protection antichute
pour modèles 2011, 7410 et 7411**



Supporto a sospensione per
paziente critici.

Suspension support for
critical patients.

Soporte de suspensión para
pacientes críticos.

Support de suspension pour les
patients critiques.

Evidenziata dalla freccia verde.

Highlighted by the Green
arrow.

Resaltada por la flecha verde.

Mis en évidence par la flèche
verte.

EP-RREE0642

**Bilancino e corpetto per
supporto anticaduta**

**Sling bar and body for fall
arrest support**

**Percha y corpiño para protección
contra caídas**

**Barre d'élingue et corps pour
support antichute**



Evidenziata dalla freccia verde.

Highlighted by the Green
arrow.

Resaltada por la flecha verde.

Mis en évidence par la flèche
verte.

Il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

The product may differ from what is shown. The manufacturer reserves the right to change the product without notice.

El producto puede diferir de lo ilustrado. El fabricante se reserva el derecho a modificar el producto sin previo aviso.

Le produit peut différer de ce qui est présenté. Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.