


ET3010 – Piastre Antiustione per Defibrillazione

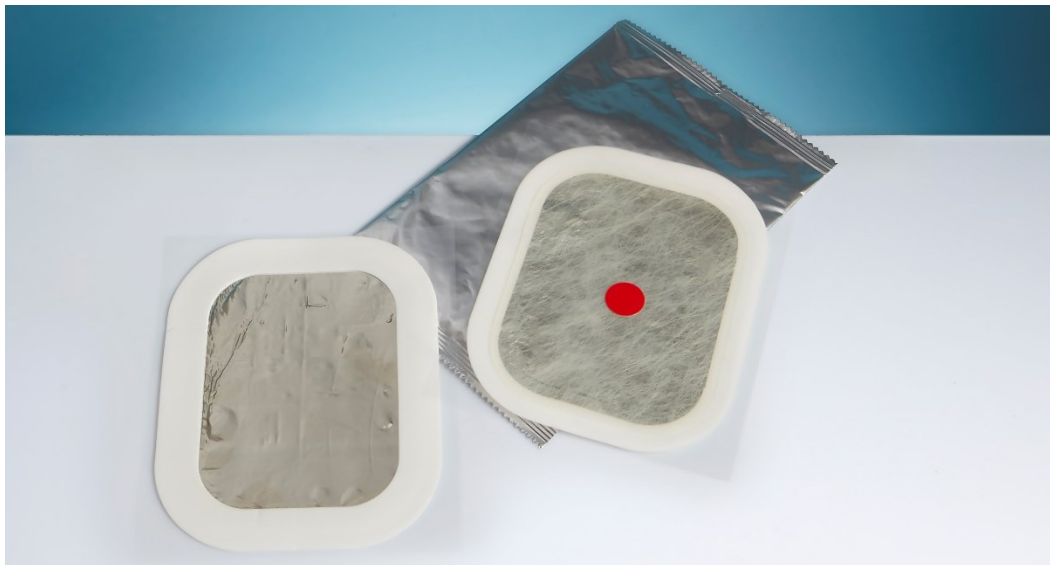

NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Descrizione

Per proteggere il paziente durante la defibrillazione o la cardioversione di pazienti adulti, mediante defibrillatore Dotato di piastre riutilizzabili, è bene usare le piastre ET3010.

Si tratta di una coppia di piastre adesive pregelate monouso antiustione idonee all'uso con qualsiasi defibrillatore dotato di elettrodi riutilizzabili.

Il supporto perimetrale è realizzato in foam a tenuta stagna e con adesivo acrilico biocompatibile. Gli angoli sono arrotondati e l'isolamento elettrico è totale ad eccezione dell'area ricoperta dall'hydrogel™ conduttivo.

Le piastre hanno superato tutti i test previsti dalle normative e risultano biocompatibili, non irritanti e stabili.

Il prodotto è privo di lattice.

Sono confezionate in buste ad apertura rapida, per agevolarne l'uso durante interventi in emergenza.

Dati tecnici

MATERIALE

SUPPORTO	Schiuma flessibile a tenuta stagna con adesivo acrilico biocompatibile	
AREA CONDUTTIVA	Pellicola stagnola con hydrogel a base acrilica	
PROTEZIONE	PET	
BUSTA	PET / Alluminio / Pellicola in PE	
TEST DI BIOCOMPATIBILITÀ		
SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA (ISO 10993-10)	Non sensibilizzante	
IRRITAZIONE CUTANEA (ISO 10993-10)	Non irritante	
CITOTOSSICITÀ (ISO 10993-10)	Non citotossico	
DIMENSIONI		
AREA ATTIVA (CM²)	140	
DIMENSIONE TOTALE (MM)	165 x 133	
DIMENSIONE ATTIVA (MM)	135 x 104	
PROPRIETÀ ELETTRICHE (ANSI/AMMI DF-80)	SPECIFICHE	VALORE
IMPEDENZA AC 10 HZ (Ω)	< 3000	< 10
IMPEDENZA AC 30 KHZ (Ω)	< 5	< 5
IMPEDENZA AC AD AMPIO SEGNALE (Ω)	< 3	2

INSTABILITÀ E RUMORE (μ V)	< 100	< 4
RECUPERO DA SOVRACCARICO (MV)	< 400 (dopo 4")	< 50
	< 300 (dopo 60") < 100	< 30
OFFSET VOLTAGGIO DC (MV)	< 100 (in 8 h)	< 10
TOLLERANZA ALLA CORRENTE (MV)	< 3000	< 1
PRODOTTO DA	TELIC S.A. - Spagna	