


EP-LU31005 Sistema Wireless BT "EUROERGO"

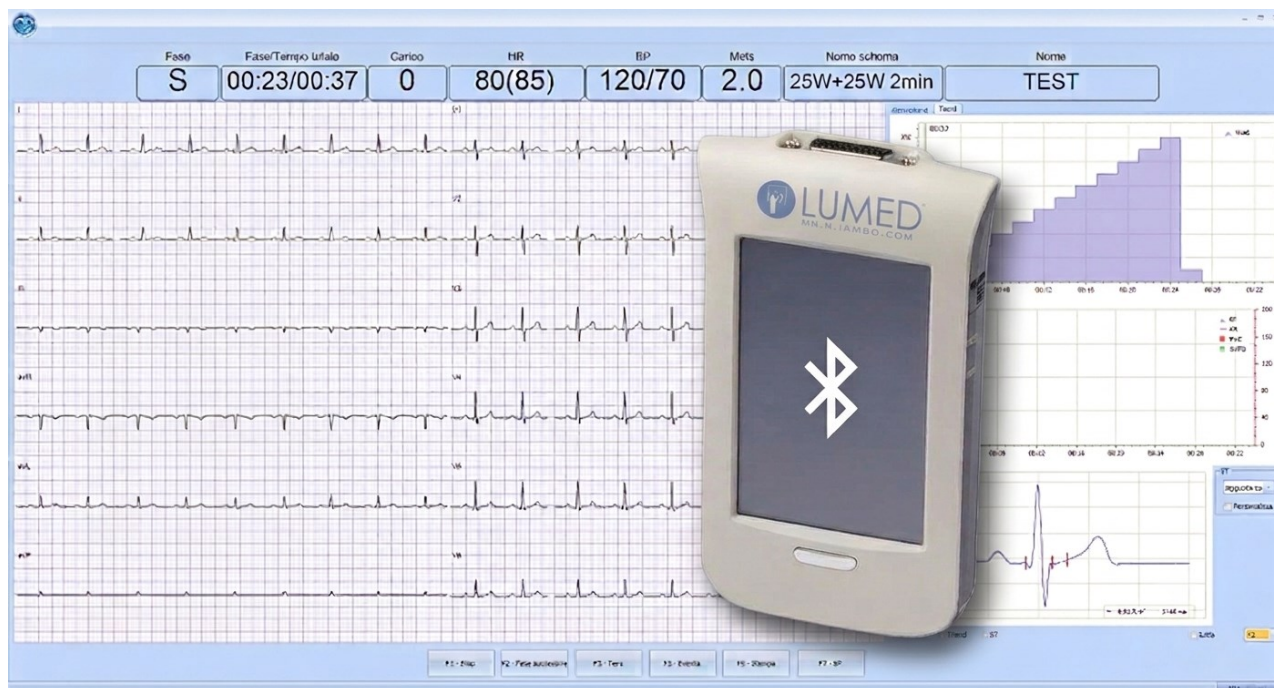

N.B. il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Descrizione

EUROERGO BT è la nuova soluzione per la prova da sforzo, con ergometro o treadmill.

EUROERGO BT abbina al software l'acquisitore wireless, dotato di display touch. Il software offre tutte le funzioni necessarie alla corretta e sicura conduzione di prove da sforzo, sia in ambito cardiologico che sportivo. La comunicazione Bluetooth garantisce la massima velocità di trasferimento dei dati acquisiti in tempo reale. La batteria interna viene ricaricata tramite la porta USB.

Il sistema si interfaccia perfettamente agli ergometri della serie EURO: EUROBIKE 3200 e 3500, lettoergometro EUROCARDIO 3500 ecc. Parimenti si abbina ai tappeti medicali della serie EP-ER.

Le misure di pressione arteriosa vengono inserite manualmente, oppure vengono rilevate direttamente da misuratore automatico esterno.

EUROERGO BT è la scelta migliore per la prova da sforzo, in ambito cardiologico, della Medicina dello Sport e in ogni altro ambito inerente.

Caratteristiche tecniche	
Frequenza di campionamento	4.096 camp./s/canale
Risoluzione	16 bit
Acquisizione	Acquisizione sincrona delle 12 derivazioni standard
Pacemaker	Rilevazione degli impulsi da pacemaker
Range dinamico	10 mV
Banda passante	0,05 - 410 Hz
CMMR	> 89 dB
Interfaccia computer	USB
Lingue disponibili	Italiano, English, Español
Grado di protezione	IPX0
Dimensioni e peso	126.5x 75.8 x 24 mm, 168 g
Condizioni ambientali	Temperatura 5°-40°C (magazzino -40°C ~ +55°C) Umidità < 80% senza condensa (magazzino <= 93%) Pressione -150 ~ 4500 m slm
Sicurezza	Classe II
Alimentazione	Batteria Li interna Ricarica da porta USB
Protezione	Tipo CF
Interfaccia	Bluetooth, USB
Dotazione standard	– Acquisitore wireless touch-screen – Cavo paziente ERGO corto a bottone/snap – Custodia riutilizzabile, con cinta e tracolla – Cavo USB – Installer per software in italiano – Manuale d'uso
Fabbricante	Suzhou Beneware Medical Equipment Co., Ltd.

